

連続血圧計で 起立性調節障害の診断を

連続血圧・血行動態測定装置

Finometer MIDI

FinometerMIDIは専用の指用カフにて非観血で**1拍毎の連続した血圧**を測定できる医療機器です。測定にはボリュームクランプ法が用いられており、指にカフを巻くだけで簡単に測定できますので、患者に負担はかかりません。補正センサによって臥位時だけでなく他の姿勢変化の測定にも対応できます。多くのシチュエーション下で血行動態の記録が可能です。

特長

- 指先だけで一拍毎の連続血圧測定
- 簡単操作のシンプル設計
- 高さ補正センサで測定中の動作に対応
- 血圧値だけではなく多彩な血行動態評価
- ヘッドアップティルト試験（保険点数980点）に最適




◆ FinometerMIDIでできること ◆

FinometerMIDI (Finapres) は日本自律神経学会や日本小児心身医学会において、**起立試験などに使用する血圧計として推奨されています。**

● 起立性調節障害の診断

小児に多いと言われる起立性調節障害 (OD:Orthostatic Dysregulation) の診断としてFinometerMIDIは用いられています。一拍毎の血圧と心拍をリアルタイムで連続的に診ることができますので、起立直後の血圧低下も的確に測定できます。失神発作を起こしうる基礎疾患を同定することを目的とした、能動起立試験が可能です。

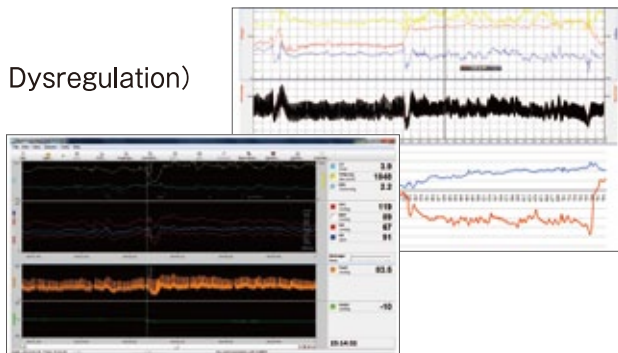

● ヘッドアップティルト試験

D225-4保険点数980点 (平成24年改正)

ヘッドアップティルト試験 (Head-up tilt test) は、めまいなどの自律神経の異常を確認するために、患者を臥位から傾斜位の状態に起こし、傾斜位の状態に保ちながら、連続的に血圧や脈拍の推移を観察する試験です。FinometerMIDIは様々な姿勢変化時での測定が可能であることに加えて、一時的な血圧測定ではなく連続的な血圧測定ができるので、まさにこの検査の活用に最適です。



- ◆ 製品に関する資料送付、またはデモンストレーションの御希望などお受け致します。御予算に応じたご提案 (例えばリースご契約) など導入向けのご相談も承ります。
- ◆ 御希望の方は当シートにご記入の上、FAX送付か直接お問い合わせ下さいませ。

FAX 03-3560-7748 Mail info@0c7.co.jp

■ ご施設名	
■ ご氏名	
■ ご住所	
■ お電話番号	■ メールアドレス

- 担当者からの製品説明希望 資料送付
 導入前相談希望 デモンストレーション希望

※お名刺にて対応頂く際には、青色の枠内に添付頂きますようお願い申し上げます。



Zero Seven

■ 日本国内総輸入販売代理店

ゼロシーセブン株式会社 ● www.0c7.co.jp

本社：〒107-0052 東京都港区赤坂 5-4-7 The Hexagon 7F TEL:03-3560-7747(代) FAX:03-3560-7748
 西日本営業所：〒651-0095 兵庫県神戸市中央区旭通 2-7-8 インテリアビル 6F TEL:078-265-6880 FAX:078-265-6881

<http://finapres.jp>